

Vis Gold-Tite®


Preservation By Design®



Étanchéité de l'implant-pilier avec la vis Gold-Tite® BIOMET 3i

Une interface implant-pilier stable et étanche réduit les micromouvements du pilier et les risques de microfuites.

- L'utilisation d'une vis Gold-Tite Certain® BIOMET 3i augmente la force de serrage de l'implant / pilier de 113 % par rapport à une vis sans revêtement.^{1*}
- La lubrification brevetée** de la surface Gold-Tite permet de visser la vis plus profondément, augmentant de ce fait la force de serrage et optimisant la stabilité du pilier.

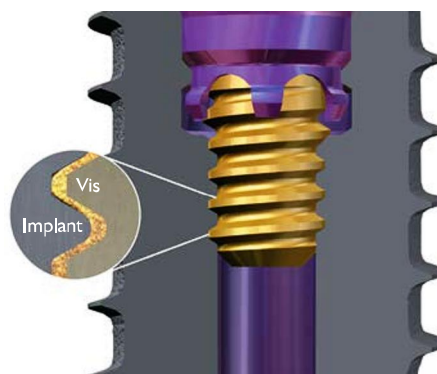

*Les études précliniques ne sont pas nécessairement indicatrices des résultats cliniques.

Vis	Tournevis			Couple
Vis à tête hexagonale Gold-Tite Certain® IUNIHG	Tournevis hexagonal	PHD02N	17 mm (L)	20 Ncm
		PHD03N	24 mm (L)	
	Embout hexagonal	RASH3N	25 mm (L)	
		RASH8N	30 mm (L)	

¹Suttin Z¹, Towse R¹. Impact du design de la vis de pilier sur l'étanchéité du système d'implant. Présenté lors du 20e Congrès scientifique annuel de l'Association Européenne pour l'Ostéointégration ; octobre 2012 ; Copenhague, Danemark. http://biomet3i.com/Pdf/Posters/P-450_Effect_of_Screw_Design_on_Implant_Seal.pdf

¹Les auteurs ont réalisé cette recherche tout en étant employés par BIOMET 3i.

**USPTO 6287116 et d'autres brevets sont en attente.

*Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre représentant commercial local BIOMET 3i.*

www.biomet3i.com.

BIOMET 3i



BIOMET 3i France
7/9 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret
France
Téléphone : +33-(0)1-41-05-43-43
Télécopie : +33-(0)1 41-05-43-40
www.biomet3i.fr

REPLACE

BIOMET 3i Dental Ibérica S.L.
EMEA Headquarters
WTC Alameda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
(Barcelona) Spain
Tel.: +34-93-470-55-00
Fax: +34-93-371-78-49



Rejoignez-
Nous



Suivez-
Nous



Regardez-
Nous



Téléchargez-
le

Certain, Gold-Tite et Preservation By Design sont des marques déposées et Providing Solutions One Patient At A Time et Design sont des marques déposées de BIOMET -3i LLC. ©2014 BIOMET 3i LLC.

Toutes les marques commerciales citées ici sont la propriété de BIOMET 3i LLC, sauf mention contraire. Ce document est uniquement destiné aux praticiens et NE doit PAS être distribué aux patients. Ce document ne doit pas être redistribué, dupliqué ou divulgué sans l'autorisation écrite express de BIOMET 3i. Pour plus d'informations sur les produits, y compris les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les effets indésirables possibles, reportez-vous à l'emballage du produit ou consultez le site Web de BIOMET 3i. Pour plus d'instructions, consultez : ifu.biomet3i.com.



INST1249F
RÉV A 04/14