

STERILISATION

DECONTAMINATION

si Bacs encastrés prévoir douchette et Vidange

ULTRASONS (ou Automate)

A 40 du sol

Eau Froide + Vidange 40
1 Pc 2000W 16A/30mA

NETTOYAGE/RINCAGE: Evier / à 60 du sol

Eau Froide + Eau Ch + Air Comprimé + Vidange avec syphon

SECHAGE ou AUTOMATE à 60 du sol

1 Pc 2000W 16A/30mA

SOUDEUSE

A 110 du sol

1 Pc 800W

Xcid ou DAC désinfect° Dynamique

A 110 du sol

1 Pc 800W

Eau Froide + Air Comprimé + vidange

AUTOCLAVE


A 60 du sol

Eau Froide + Vidange

A 120 du sol

PC 2000W 16A/30mA

Rj45 sur réseau informatique

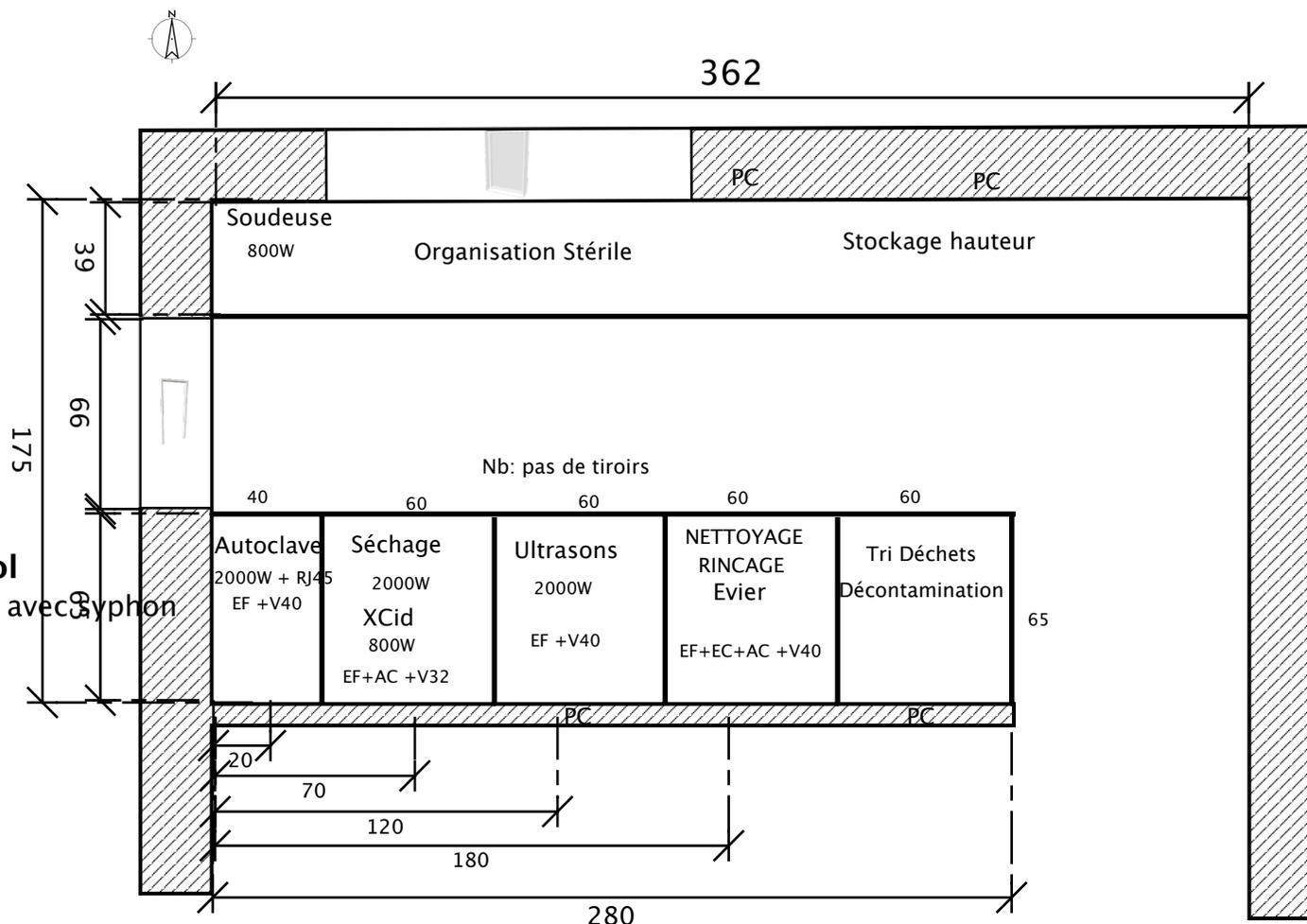

REMARQUES:

Air Eau en PE 10/12 mini 8 bar avec raccords 3/8 et vannes d'arrêts

Vidanges avec syphon / prévoir les raccordements vasques/Rob

Ce Local doit être bien Ventilé

Ce Local doit avoir une bonne isolation phonique

Faire le tour des besoins en prises supplémentaires